

# para Sierra de autopsia MOPEC



La sierra de autopsia MOPEC es una herramienta especializada diseñada para la extracción y corte de muestras de hueso. No es para uso del consumidor y debe ser utilizado únicamente por personal calificado con experiencia en procedimientos de sala de autopsias.

## ADVERTENCIAS

1. Lea las instrucciones completamente para asegurar un funcionamiento adecuado.
2. Nunca se deben utilizar hojas desafiladas o dañadas.
3. Mientras esté en uso, mantenga las manos alejadas de la hoja oscilante.
4. Como ocurre con todos los dispositivos eléctricos, se debe prestar el debido cuidado y consideración al funcionamiento de la sierra de autopsia.
  - A. Inmersión en cualquier líquido o autoclave ma. en caso de riesgo de descarga eléctrica o daño permanente, B. La continuidad de la conexión a tierra debe verificarse periódicamente.
  - DO.El cable de alimentación debe mantenerse alejado del área de corte en todo momento.
  - D.Al desconectar la sierra de autopsia de una toma de corriente, tire del enchufe. Nunca lo desconecte tirando del cable.
  - MI.Para garantizar una conexión a tierra adecuada, conecte la unidad a un receptáculo marcado como "Grado hospitalario".
  - F.No lo opere en áreas donde puedan estar presentes vapores inflamables o explosivos.

5. Se debe tener en cuenta la contaminación del aire creada durante el proceso de corte.

6. **METRO**OPEP**RECORDATORIO: UEL USO DE ESTE INSTRUMENTO IMPLICA CONTACTO DIRECTO DE RUTINA CON PATÓGENOS TRANSMITIDOS POR LA SANGRE. METRO**La OPEP **RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE OSHA**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD UNIVERSALES AL MANEJAR ESTE INSTRUMENTO.

N.º de modelo BD040 115 VCA 60 Hz

N.º de modelo BD045 230 VCA 60 Hz

Nos complace que haya seleccionado y adquirido la sierra de autopsia MOPEC. Las instrucciones de funcionamiento deben leerse completamente antes de utilizar el equipo.

## ASAMBLEA

1. Afloje el tornillo de fijación del eje con la llave proporcionada.
2. Inserte el eje de la hoja hasta su máxima profundidad en el eje de salida triangular.

## IMPORTANTE

3. ¡No apriete demasiado el tornillo de fijación del eje con la llave proporcionada!

4. Conecte el cable de alimentación de la sierra de autopsia al tomacorriente de pared adecuado.

N.º de modelo BD040 115 VCA 60 Hz

N.º de modelo BD045 230 VCA 60 Hz


Sólo se puede garantizar una conexión a tierra adecuada cuando se conecta (a un receptáculo equivalente marcado como "Grado hospitalario").

y movimientos hacia abajo

Se recomienda mantener presionado.

la unidad con una mano como se ilustra, deslice el interruptor a la posición "ON" y, usando el pulgar como indicador, presione la hoja hacia el hueso,

La hoja debe insertarse en un ligero ángulo en el hueso hasta que la presión de corte disminuya, lo que indica que la hoja ha atravesado el hueso. Luego se debe levantar la hoja dejando la punta en la ranura de corte y luego avanzar a lo largo de la línea de corte aproximadamente media pulgada y repetir como arriba. **NO ejerza una presión de trabajo excesiva.**

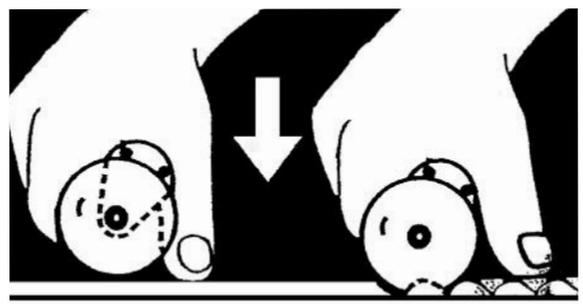

Técnica operativa

## MANTENIMIENTO, CUIDADO Y SERVICIO

Lubricación de cojinetes: no se requiere ninguna. Los cojinetes están lubricados durante toda la vida útil de la sierra.

La unidad desenchufada se puede limpiar con un paño suave humedecido o una esponja humedecida con detergente desinfectante. Seque con un paño.

La construcción del motor abierto es necesaria para enfriar operación. **La esterilización con vapor, la inmersión en líquidos o el tratamiento en autoclave dañarán gravemente los componentes internos del motor.**

Es necesaria la selección, el uso y el mantenimiento adecuados de una hoja afilada para realizar un corte seguro y eficiente. La fricción adicional causada por una hoja desafilada generará un calor excesivo en la hoja.

## PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO DE GARANTÍA

El servicio de garantía se puede obtener devolviendo el producto inoperativo a  
MOpeC  
21750 Coolidge Hwy.  
Parque Roble MI 48237  
800-362-8491


## GARANTÍA LIMITADA

Este producto está garantizado por MOpeC Corporation contra defectos de material y mano de obra por un período de **UN AÑO** desde la fecha de su compra por parte del usuario original. Esta garantía se otorga únicamente al usuario original y está sujeta a las siguientes condiciones

## LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

- piezas como cuchillas, que requieren reemplazo bajo uso normal.
- Daños o mal funcionamiento resultantes de:
  - (1) Uso negligente o mal uso del producto,
  - (2) Uso con voltaje o corriente inadecuados,
  - (3) Uso contrario a las instrucciones de funcionamiento y las limitaciones indicadas en las mismas,
  - (4) mantenimiento inadecuado,
  - (5) Montaje inadecuado o
  - (6) Alteraciones o modificaciones del producto.

PARTS LIST		
Part No.	Description	Qty.
AO 163	Conjunto de cepillo	2
AO 164	Tapa del cepillo	2
BD-101	Hoja, sección de 2,5" con tornillo de fijación del eje	1
300018	fijación del eje	1
AO 193	Cable de alimentación	1
AO 066	Enchufe de grado hospitalario	1
335029	Llave inglesa	1

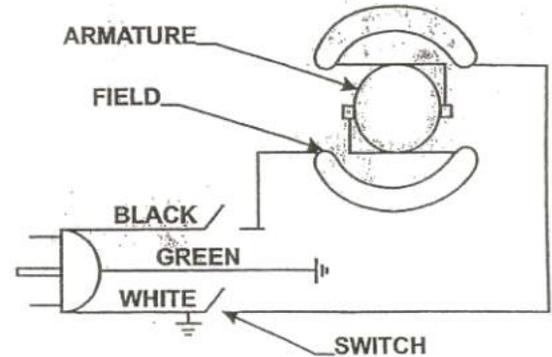

## RENUNCIA DE GARANTÍA IMPLÍCITA

En la medida en que lo permita la ley, MOpeC renuncia a todas las garantías implícitas, incluida cualquier garantía de COMERCIABILIDAD y cualquier garantía de IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. No existen garantías que se extiendan más allá de la garantía expresa limitada descrita anteriormente. En caso de que alguna garantía esté implícita por ley en relación con la compra de este

lástima lo anterior  
nty for FITNeSS FOR/  
h garantía será  
período de garantía xpress

MOpeC, a su elección, reparará o reemplazará un producto defectuoso que esté cubierto por esta garantía de conformidad con los términos de los "procedimientos de servicio de garantía" establecidos. El remedio por incumplimiento de garantía se limita estricta y exclusivamente a la reparación o reemplazo de productos no conformes y MOpeC no autoriza a nadie, incluidos, entre otros, sus distribuidores, a extender u ofrecer cualquier remedio adicional. EN NINGÚN CASO MOpeC SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑOS CONSECUENCIALES O INCIDENTALES. Algunos estados no permiten esa exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique a usted.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO.