

BC-2800Vet

Analizador de Hematología Automático

Especificaciones Técnicas

Parámetros WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT Parámetros Adicionales para Perro, Gato, Ratón, Rata, Conejo, Vaca y Mono Linfa#, Mon#, Gran#, Linfa%, Mon%, Gran%, Eos% (para perro y gato) Histogramas para WBC, RBC y PLT	Entrada/Salida RS232 x 2, 1 impresora en paralelo (opcional), 1 escáner de código de barras (opcional), 1 interfaz de teclado
Principios Método de impedancia eléctrica para el conteo y método libre de cianuro para Hemoglobina	Impresión Grabadora térmica, papel de 50mm de ancho, multitud de formatos de impresión, impresora opcional
Volumen de Muestras Prediluido: 20µL Sangre entera: 13µL	Entorno Operativo Temperatura: 15°C~30°C Humedad: 30%~85%
Rendimiento 25 muestras por hora	Requisitos de Potencia AC 100~240V, 50/60Hz
Visualización Visualización LCD de color Resolución: 640 x 480	Dimensión 322mm (Ancho) x 437mm (Altura) x 386mm (Espesor)
Prórroga WBC, RBC, HGB≤0.5%, PLT≤1.0%	Peso 17.9 Kg



BC-2800Vet

Analizador de Hematología Automático



BC-2800Vet

Analizador de Hematología Automático



- CBC+DIFF para Gato, Perro, Caballo, Ratón, Rata, Conejo, Vaca y Mono;

Medición adicional de Eos% para perro y gato.

- 13 especies de animales predefinidos + 3 animales programables a petición
- Totalmente automatizado, compacto, flexible y costo bajo
- Rendimiento: 25 muestras por hora
- Limpieza de la sonda de la muestra automática
- Gran almacenamiento de datos de 10,000 resultados con histogramas

Múltiples Especies de Animales

- 13 programas predefinidos (perro, gato, caballo, ratón, rata, conejo, cerdo, vaca, búfalo, camello, oveja, mono y cabra)+ 3 animales programables a petición

Conveniente y Seguro de Usar

- Totalmente automático
- Sistema de auto-limpieza integrado minimiza mantenimiento
- Reactivos libres de cianuro evitan riesgos medio ambientales


Configuración Superior

- Tamaño compacto requiere pequeño espacio de banco
- Comunicación intuitiva caracterizada por visualización LCD
- grande de color
 - Impresora térmica incorporada permite impresión automática después de cada prueba

Alta Confiabilidad y Precisión

- Sistema de conteo independiente para cada especie que asegura alta precisión
- Programas de calibración y control de calidad totalmente integrados


Operation Procedures

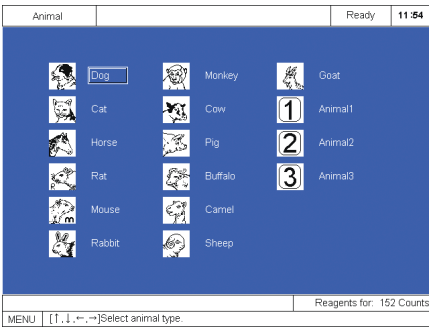

Paso 1: Nuestra lista integrada hace fácil la selección de especies



Paso 2: Procedimientos de aspiración y dilución totalmente automáticos

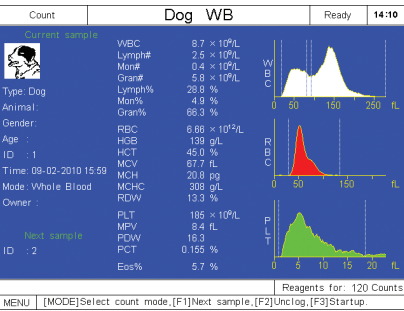

Paso 3: Resultados obtenidos en menos de 3 minutos; Todos los parámetros e histogramas son visualizados e impresos.



Paso 4: Impresión programable multi-formato